



LIQUEEFOAM BD

SILIKONSCHAUMVERBAND MIT HAFTRAND

26


2026 / 01

LIQUEEFOAM BD

Silikonschaumverband mit Hafttrand

LIQUEEFOAM BD ist ein hochwertiger Silikonschaumverband mit Hafttrand, der für die zuverlässige Versorgung exsudierender Wunden entwickelt wurde. Durch die Kombination aus Polyurethanschaum und superabsorbierenden Fasern bietet der Verband eine hohe Absorptions- und Retentionsleistung.

Die integrierte Silikon-Wundkontaktschicht leitet Wundexsudat effektiv von der Wunde weg und unterstützt ein feuchtes Wundmilieu, das die natürliche Wundheilung fördert. Gleichzeitig ermöglicht sie einen atraumatischen Verbandwechsel und erhöht den Patientenkomfort. Eine wasserdichte Außenschicht schützt die Wunde zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien.

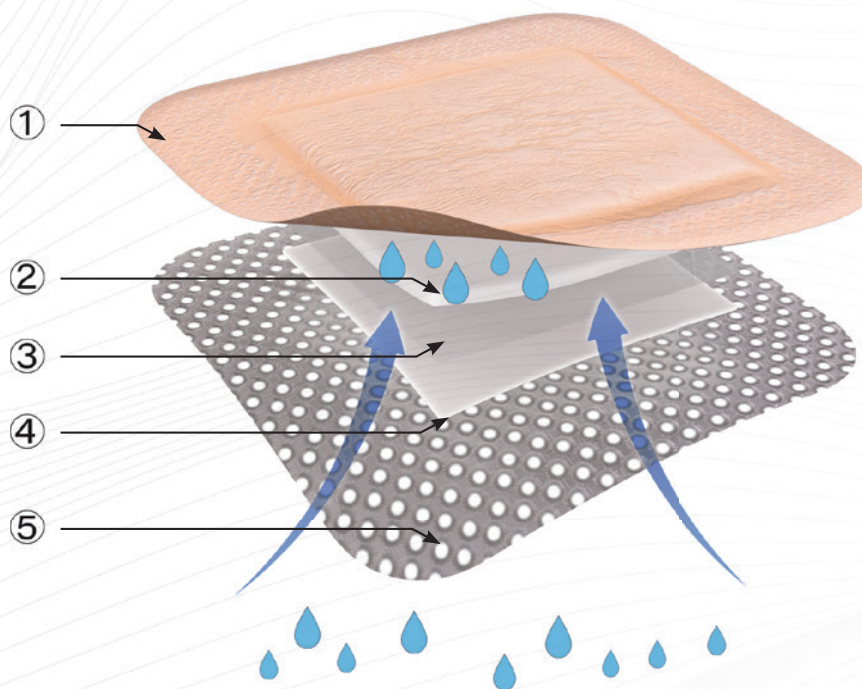

Funktionsprinzip des mehrschichtigen Aufbaus

LIQUEEFOAM BD absorbiert überschüssiges Exsudat und unterstützt aktiv den Heilungsprozess. Die sanft haftende Silikon-Wundkontaktschicht [5] sorgt für eine sichere Fixierung, ohne an der feuchten Wunde zu kleben. Der Polyurethanschaum [4] nimmt die Wundflüssigkeit auf und leitet sie über eine Vlieschicht [3] an die superabsorbierende Faserschicht [2] weiter. Dort wird das Exsudat durch Gelbildung gespeichert, wodurch das Risiko von Mazerationen reduziert wird. Die wasserdichte Außenschicht [1] dient als Barriere gegen Feuchtigkeit und Mikroorganismen.

Leistungen

- ✓ Barriere gegen Mikroorganismen
- ✓ Optimales feuchtes Wundmilieu
- ✓ Risikoveringerung von Mazeration
- ✓ Schmerzminimierung bei Verbandwechsel

Exsudatmenge (E)

kein / gering

mäßig

stark

sehr stark



Wundphase (P)

feuchte Nekrose

Fibrinbelag

Granulation

Epithelisierung

Infektion



Wundtiefe (W)

flach

tief

Kavität



LIQUEEFOAM BD

Unterstützung des Heilungsprozesses

LIQUEEFOAM BD ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B. Druckgeschwüren, Bein- und Fußgeschwüren, traumatischen Wunden oder Operationswunden.

In Kombination mit Gelen kann LIQUEEFOAM BD auch bei trockenen oder nekrotischen Wunden verwendet werden. Darüber hinaus hilft der Verband, postoperative Blasenbildung zu reduzieren, und kann im Rahmen prophylaktischer Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Haut eingesetzt werden.

Der Silikon-Schaumverband kann beim Auflegen atraumatisch gelöst und bei Bedarf neu positioniert werden, ohne dass die Hafteigenschaften beeinträchtigt werden.



Leistungen

- ✓ Barriere gegen Mikroorganismen
- ✓ Optimales feuchtes Wundmilieu
- ✓ Risikoveringerung von Mazeration
- ✓ Schmerzminimierung bei Verbandwechsel

Indikationen

- ✓ Beingeschwüre
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Fußgeschwüre
- ✓ Traumatische Wunden
- ✓ Operationswunden

Größe		Zusatzinformation	VE	PZN	REF
XS	7,5 cm x 7,5 cm	4,5 cm x 4,5 cm (Pad)	1 x 10	19868729	LQF-7575-BD
S	10 cm x 10 cm	6,2 cm x 6,2 cm (Pad)	1 x 10	19868735	LQF-1010-BD
M	12,5 cm x 12,5 cm	8,5 cm x 8,5 cm (Pad)	1 x 10	19868741	LQF-1212-BD
L	15 cm x 15 cm	10,5 cm x 10,5 cm (Pad)	1 x 10	19868758	LQF-1515-BD
XL	17,5 cm x 17,5 cm	12,5 cm x 12,5 cm (Pad)	1 x 5	19868764	LQF-1717-BD
XXL	20 cm x 20 cm	15 cm x 15 cm (Pad)	1 x 5	19868770	LQF-2020-BD

L+F Medizinprodukte GmbH
Am Gewerbepark 1a
63594 Hasselroth
Germany [DE]

Phone: +49 6184 99 53 357
Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de
Web: www.lf-medizinprodukte.de

