




LIQUEEL®
SILIKONSCHAUMVERBAND OHNE HAFTRAND

25
2025 / 01

LIQUEEL®

Silikonschaumverband ohne Haftrand

LIQUEEL® besteht aus einer wasserdichten, dampfdurchlässigen Außenschicht aus Polyurethanfolie **[1]**, einer Polyurethanschaumschicht **[2]** mit hoher Absorptionskapazität für gering bis stark exsudierende Wunden. Die weiche Wundkontaktschicht **[3]** trägt dazu bei, ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, um den natürlichen Heilungsprozess zu unterstützen. LIQUEEL® lässt sich sehr einfach an plane, konvexe oder konkave Wundsituationen anpassen. Falls erforderlich, können Schaumsegmente **[4]** ohne den Einsatz von sterilen Instrumenten entfernt werden.

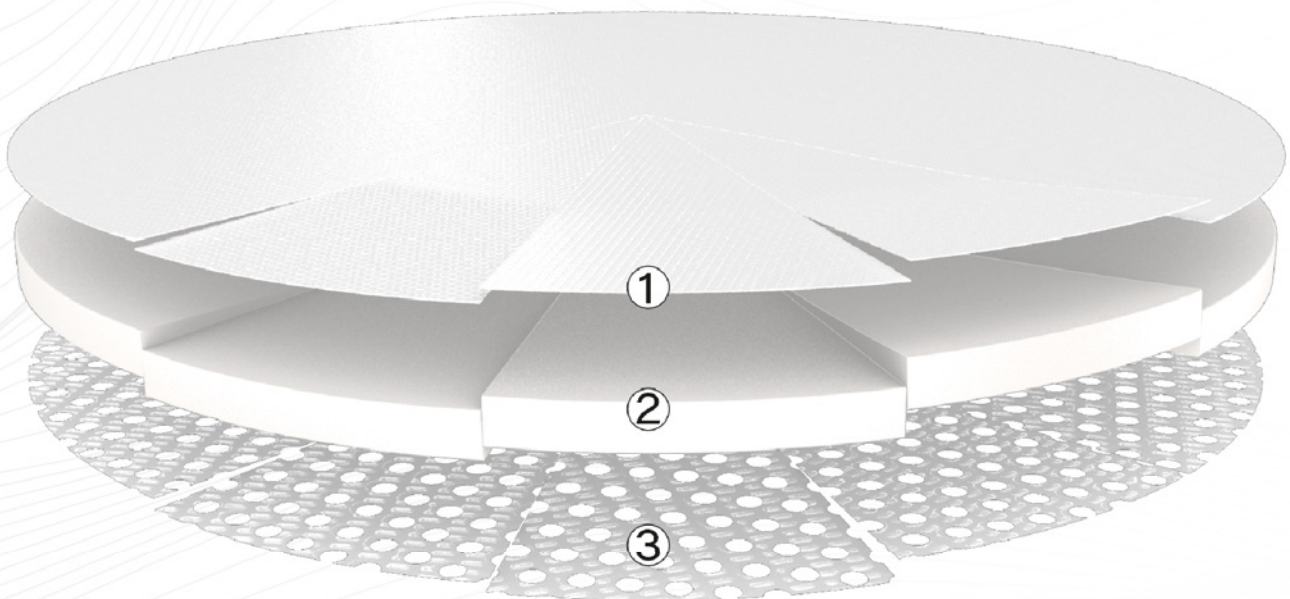

[1] LIQUEEL®
Detailansicht der wasserdichten
Außenschicht




[2] LIQUEEL®
Detailansicht des absorbierenden
Schaumstoffs



[3] LIQUEEL®
Detailansicht der sanft haftenden
Silikon-Wundkontaktschicht



[4] LIQUEEL®
Detailansicht der heraustrennbaren
Schaum-Segmente

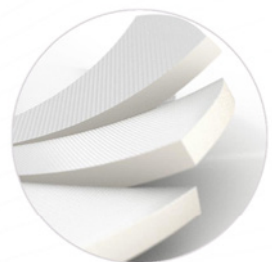

Leistungen

- ✓ sanft haftend und sehr saugfähig
- ✓ Minimierung von Wundmazeration
- ✓ atraumatischer Verbandwechsel
- ✓ hochgradig anpassungsfähig
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Exsudatmenge (E)

- kein / gering
- mäßig
- stark
- sehr stark

Wundphase (P)

- Nekrose
- Fibrinbelag
- Granulation
- Epithelisierung
- Infektion

Wundtiefe (W)

- flach
- tief


LIQUEEL®

Intelligentes Design für flexible Anwendungsmöglichkeiten

LIQUEEL® ist ein steriler, saugfähiger, selbsthaftender, weicher Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikonbeschichtung. Das intelligente Design von LIQUEEL® ermöglicht dem Anwender, die Wundauflage an die individuell vorliegende Wundsituation anzupassen. Falls erforderlich, können einzelne Schaumsegmente, ohne den Einsatz von sterilen Instrumenten, entfernt werden.

LIQUEEL® ist indiziert für die Behandlung von leicht bis stark exsudierenden Wunden und trägt bei Vorhandensein von Exsudat dazu bei, ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, um den natürlichen Heilungsprozess zu unterstützen.

LIQUEEL® ist besonders geeignet zur Versorgung konvexer sowie konkaver Wundsituationen und besonderer Körperstellen und -formen (z.B. Ferse, weibliche Brust, Ellenbogen, Sakralbereich, Knie), hat ausgezeichnete Hafteigenschaften und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel.

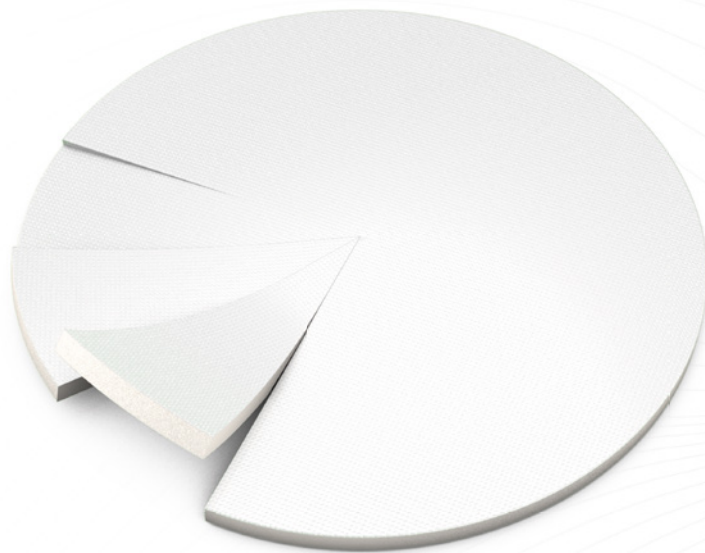

Leistungen

- ✓ sanft haftend und sehr saugfähig
- ✓ Minimierung von Wundmazeration
- ✓ atraumatischer Verbandwechsel
- ✓ hochgradig anpassungsfähig
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Indikationen

- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Venöse Beingeschwüre
- ✓ Arterielle Beingeschwüre
- ✓ Nicht infizierte, diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Verbrühungen
- ✓ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- ✓ Schürf-, Riss- u. kleine Schnittwunden

	Größe	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
S	Ø 75 mm	Ø 56,5 mm bis 75 mm	1 x 10	19295624	LQ-75
M	Ø 150 mm	Ø 112,5 mm bis 150 mm	1 x 10	19295630	LQ-150
L	Ø 220 mm	Ø 165 mm bis 220 mm	1 x 10	19295647	LQ-220

A dynamic splash of pink liquid, possibly representing a medical product, is shown in the lower half of the page. The splash is captured mid-air, with numerous droplets and bubbles visible, creating a sense of energy and purity. The liquid is a vibrant pink color, contrasting with the white and grey background.

*L+F Medizinprodukte GmbH
Birkenweiher Straße 4
63505 Langenselbold
Germany [DE]*

*Phone: +49 6184 99 53 357
Fax: +49 6184 99 53 358
E-Mail: info@lf-med.de
Web: www.lf-medizinprodukte.de*